

# LÁBMASSZÍROZÓ

M-FOOT-03

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót.**

## 1. ÁTTEKINTÉS

Az intelligens lábmasszírozó működése a hagyományos orvoslás, a meridián, a mágneses terápia és a láb reflex zóna egészségügyi módszerén alapul, modern elektronikus technológiával és orvosi eredményekkel kombinálva.

## 2. GOMBOK ÉS HASZNÁLATUK

### GOMBOK

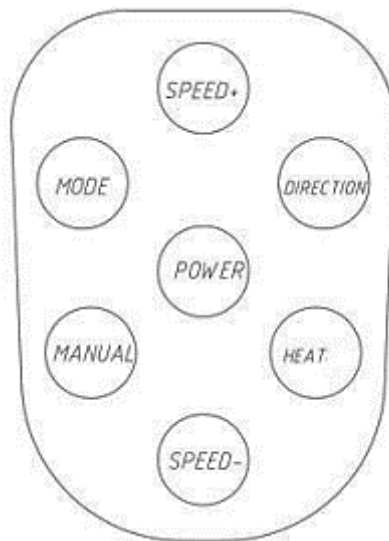

**POWER:** Nyomja meg a bekapcsológombot a masszázs elindításához vagy leállításához.

**MODE:** A készülék három automatikus programmal van felszerelve, amelyek a sebességének mértékét és erejét lehet szabályozni.


**HEAT:** Nyomja meg a Heat gombot a fűtés be-és kikapcsolásához.

**MANUAL:** Nyomja meg a Manual gombot a manuális üzemmódba váltáshoz.


**DIRECTION:** Manuális üzemmódban nyomja meg a Direction gombot, hogy megváltoztassa a forgás irányát.

**SPEED:** Manuális üzemmódban nyomja meg a Speed gombot, hogy megváltoztassa a masszázs sebességét. Három fokozat közül választhat: magas, közepes és alacsony. Nyomja meg a **SPEED+** vagy a **SPEED-** gombot, ha növelni vagy csökkenteni akarja a sebesség fokozatát. Hang jelzi a váltást. A legmagasabb és a legalacsonyabb fokozaton nem ad ki hangot a készülék.

## TÁVIRÁNYÍTÓ

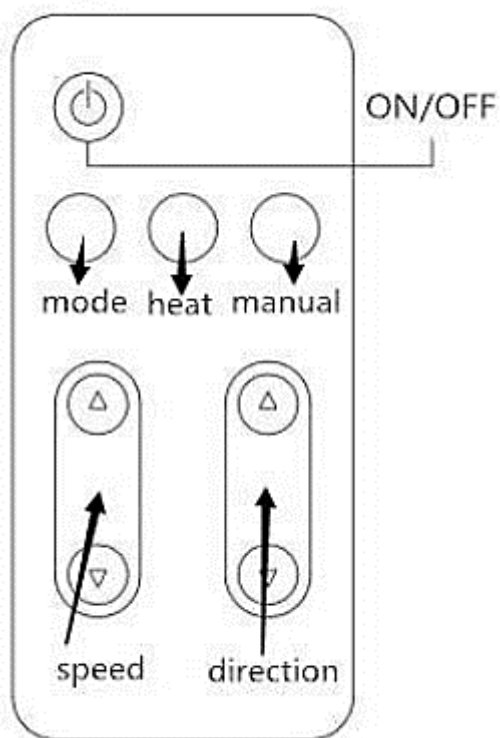


## KIJELZŐ

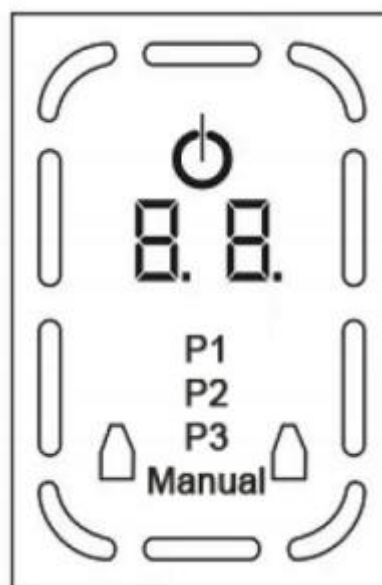

**Figyelmeztetés!** A készülék 15 perc használat után automatikusan leáll. Ha ismét használatba szeretné venni, csak nyomja meg a bekapcsológombot a készülék elindításához.


A fogantyú szabadon állítható, mozgatható 360 fokban.

Forgassa el a fogantyút, hogy meglazuljon, ezután állítsa be a kívánt szöget, majd húzza meg a fogantyút, hogy úgy maradjon.

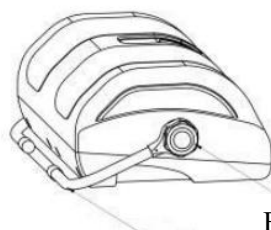

Fogantyú nyél


Fogantyú gomb

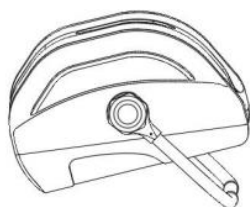

Lábszár masszázsa



Lábmasszázs

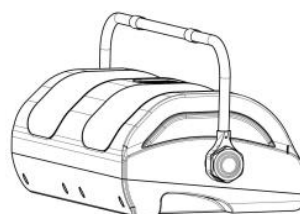

A fogantyú könnyen mozgatható

### **3. ÓVINTÉZKEDÉSEK**

- (1) Ellenőrizze, hogy a feszültség megfelel-e a masszírozó tulajdonságainak. Ne nyúljon az áramellátáshoz vizes kézzel. Miután csatlakoztatta a készüléket az áramellátáshoz, ne hagyja őrizetlenül.
- (2) Ne használja a készüléket takaró vagy párna alatt, mert ezzel túlmelegedést, tüzet, áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.
- (3) Ne használja a készüléket a fürdőszobában.
- (4) Ne üljön rá, illetve ne fejtse ki erőt a készülékre.
- (5) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék bármely nyílásába.
- (6) Ha bármilyen sérülést fedez fel a készüléken vagy a készülék vezetékén, azonnal állítsa le a használatát.
- (7) Ne használja a készüléket vizes lábra vagy alvás közben.
- (8) Figyelmeztetés! Akik a következő tüneteket produkálják, elővigyázatosan használják a készüléket: daganatos betegek, csonttritkulásban és hipertermiában szenvedők, értelmi fogyatékos személyek, epilepsziás betegek, aktív tuberkulózisban vagy súlyos szívelégtelenségben szenvedők, a testben lévő elektronikus eszközökkel rendelkező betegek, vérzési rendellenességekkel vagy vérzési hajlammal rendelkező betegek, állapotos nők, allergiában szenvedők.
- (9) Tilos a következő orvosi elektronikus eszközökkel egyidejűleg használni!
  - (a) Beültethető orvosi elektronikus műszerek, például szívritmus-szabályozók.
  - (b) Életfenntartó orvosi elektronikus műszerek, például mesterséges szív vagy tüdő.
  - (c) Orvosi elektronikus eszközök, például elektrokardiográfok.

### **4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- 1) Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt.
- 2) Ne használjon benzolt, hígítót vagy más maró hatású oldószert a tisztításához.
- 3) Ne használjon nedves ruhát a tisztításhoz, kizárólag szárazon törölje át a készüléket.
- 4) A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja.
- 5) Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, nyílt lángnak vagy közvetlen napfénynek.
- 6) Óvja a készülék épségét.

### **5. PARAMÉTEREK**

Tápellátás: 220-240V

Áramfelvétel: 40W

Működtetési idő: 15 perc

## 6. ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS, GARANCIA

### 1. ELÁLLÁS

A vásárlást követő 14 napon belül Ön indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

#### **Figyelem!**

Az elállás kizárólag olyan termékre vonatkozhat, amelyeket legfeljebb egyszer kipróbáltak. Amennyiben a termék folyamatos használat alatt állt a 14 napos időtartam alatt, a termék átvételét és a vételár visszatérítését megtagadjuk.

Az indoklás nélküli elállás során csak hibátlan, sérülésmentes, az eredeti csomagolásba (az eladáskori állapottal megegyezően) visszahelyezett terméket veszünk vissza. Ezért kérjük, hogy a termék csomagolását szíveskedjék 14 napig megőrizni.

### 2. GARANCIA

A garancia időtartama a vásárlástól (számla kiállításától) számított 12 hónap.

#### **Figyelem!**

Használatból eredő minőségi romlásra, sérülésre, hibára a garancia nem terjed ki.

Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibára, károsodásra, valamint a nem az előírtak szerinti kezelés, tárolás miatt bekövetkezett sérülésekre a garancia nem terjed ki.



**BP World Zrt.**

Ügyfélszolgálat: +36 70 394 2297

E-mail: [info@bipi.hu](mailto:info@bipi.hu)

Web: [www.bipi.hu](http://www.bipi.hu)