


**A lábápolás élménye megváltozott
360 fokos teljes körű masszázs**

LÁBMASSZÍROZÓ

M-FOOT-05

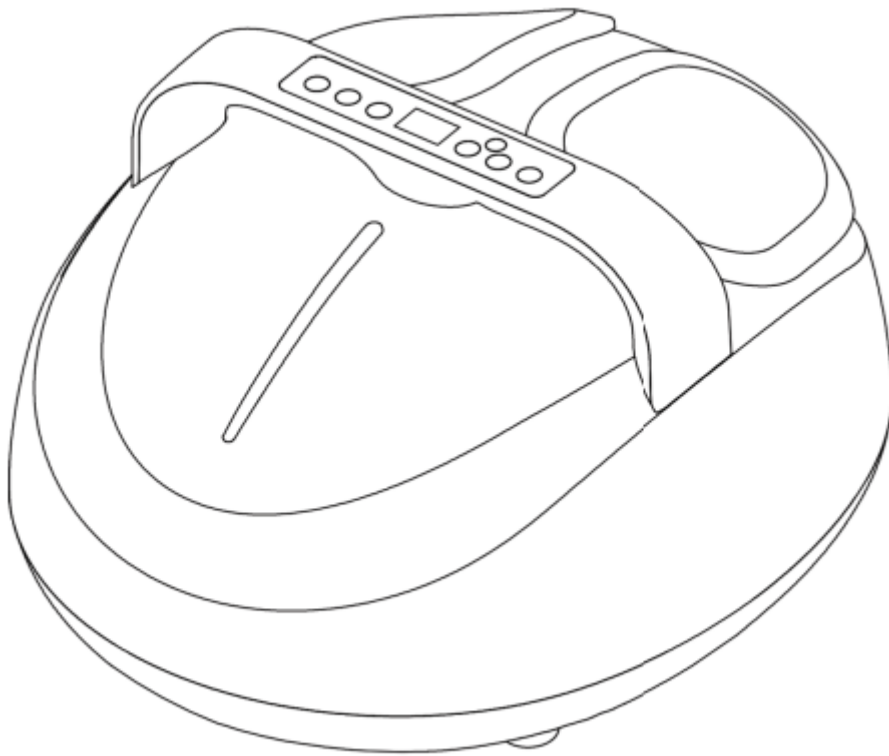

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott lábmasszírozó készüléket választotta. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat, különösen nagy figyelmet fordítson a biztonsági leírásokra.

A kézikönyv biztonságos és hatékony működési módszereket biztosít a felhasználók számára, ezért kérjük, hogy elolvasása után tartsa meg a jövőbeli kérdések felmerülése végett.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1) A biztonságos és megfelelő használat érdekében kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt.
- 2) A terméket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.
- 3) Használat után vagy tisztításkor kérjük áramtalanítsa a készüléket.
- 4) A fűtés funkciót körültekintően használja, hogy elkerülje a lehetséges égési sérüléseket.
- 5) Ne használja túl érzékeny bőr vagy rossz vérkeringés esetén.
- 6) Ne takarja le a készülék motorját, túlmelegedés következtében történő esetleges meghibásodás vagy sérülés elkerülése érdekében.
- 7) Gyermek és fogyatékkal élő személyek kizárólag felügyelettel használhatják a készüléket.
- 8) Ha rosszul érzi magát a készülék használata során, kérjük, azonnal állítsa le.
- 9) Ne használja ezt a terméket, ha: a tápkábel vagy a hálózati csatlakozó sérült, a készüléket víz érte vagy megsérült.
- 10) Ne használjon a gyártó által nem támogatott alkatrészeket.
- 11) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- 12) Ha meg akarja szakítani az áramellátást, kérjük a készüléket kapcsolja ki és ne a csatlakozót húzza ki az áramellátásból.
- 13) Ez a termék nem használható öndiagnózisként vagy kezelésként, használata előtt konzultáljon orvosával.

A) Használati környezet

- 1) Ne használja a készüléket nyirkos vagy poros környezetben, ezzel óvva a készüléket az esetleges meghibásodásuktól.
- 2) Ne használja a készüléket 40°C foknál magasabb hőmérsékletű helyiségben.
- 3) Ne használja a készüléket a szabadban.
- 4) Ne tárolja a készüléket fűtőberendezés mellett, illetve tűzhely közelében. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek.

B) Készülék használatának elkerülése


Ha a következő állítások bármelyike igaz önre, kérjük konzultáljon orvosával a készülék használata előtt:

- 1) Bármilyen orvosi kezelés alatt álló személy.
- 2) Nők esetében nem ajánlott a készülék használata menstruáció és terhesség alatt.

A KAPCSOLÓK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1) Ne üzemelje be a készüléket és ne váltson a kapcsolók között vizes kézzel.
- 2) Ne érje a kapcsolókat víz vagy bármilyen folyadék.
- 3) Ne használja a készüléket 30 percnél hosszabb ideig.
- 4) Ne használja a készüléket, ha sérülést fedezett fel rajta.
- 5) Ne használja a készüléket 1 órával étkezés előtt és után.
- 6) Ha alacsony hőmérsékletű helyiségben használja a készüléket, ne kapcsolja be a fűtési funkciót. Csak a megszabott átlag hőmérsékletű helyiségekben használható a fűtési funkció.
- 7) Ha a készüléket hirtelen alacsony hőmérsékletű helyiségből magas hőmérsékletűbe helyezi át, az a kialakult pára lecsapódásához ezáltal a készülék meghibásodásához vezethet. Kérjük, az átlag hőmérsékletnek megfelelő helyiségben tárolja a készüléket, használata előtt 1 órával.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

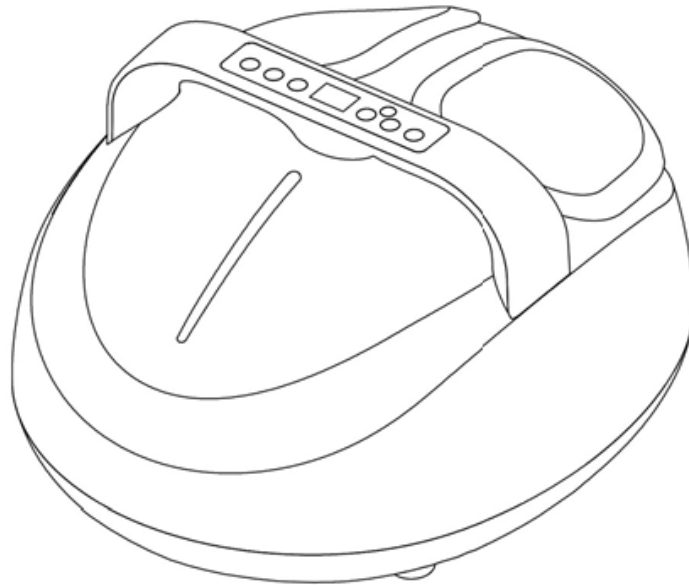

- 1) Központi felület: kijelző
- 2) Elülső rész alsó központja: dörzsölő masszázs, láb ívének masszázsa, fűtési funkció
- 3) Elülső rész alsó részének az eleje: forgó masszázs, láb akupunktúrás masszázsa
- 4) Elülső rész alsó részének a hátulja: gyúró masszázs, akupunktúrás masszázsa
- 5) Belső felület: légszák, nyomásos masszázs
- 6) Elülső rész alsó felülete: kimosható szövet, tisztítás
- 7) Készülék alja: kábelzsínór tároló

KULCSFUNKCIÓ



Power: készülék be- és kikapcsolása

Intensity: masszázs intenzitásának szabályozása személyre szabottan – 9 különböző fokozat, alapértelmezett: 5-ös fokozat

Time: masszázs időtartamának szabályozása – 5-30 perc között, alapértelmezett: 15 perc

Heat: fűtési funkció be- és kikapcsolása

Mode: 3 féle masszázs lehetőség között lehet választani – alapértelmezett: 1

Vibration: rezgés, vibráció szabályozása – U1 és U2

TERMÉKJELLEMZŐK ÉS TERMÉKHASZNÁLAT

A termék jellemzői

- 1) Ízléses, könnyű és kényelmes a használata.
- 2) Többféle masszázs funkció egy készüléken belül.
- 3) Teljes lábmasszázs, mely az egész testre hatással van.
- 4) Kimosható szövettel rendelkeznek, így könnyű a tisztán tartása.
- 5) Kábelzsinór tárolórész a kényelmes tároláshoz.
- 6) A készülék fűtési felülettel rendelkezik, ezért elővigyázatosan kell használni a fűtési funkciót.
- 7) Ha a készülék kábele sérült, cseréltesse ki, mielőtt újra használná a terméket.



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ÉS FUNKCIÓI

1) Indítás: Nyomja meg a Power gombot a készülék bekapcsolásához, ezzel elindul az alapértelmezett 15 perces masszáz, majd nyomja meg újra a gombot a készülék leállításához.

2) Mód: A készülék bekapcsolásakor az alapértelmezett módon kezd el működni (Mode 1), melyet a Mode gomb bal oldalán lévő lámpa felvillanása jelez. Nyomja meg egyszer a Mode gombot, hogy a következő módot használja (Mode 2). Átváltásakor a jobb oldalon lévő lámpa villan fel. Ha pedig még egyszer megnyomja a Mode gombot, az utolsó módra vált a készülék (Mode 3), melyet mindkét lámpa felvillanása jelez.

Mode 1: gyors és lassú gyúró és préselő masszáz

Mode 2: gyors gyúró masszáz

Mode 3: finom préselő masszáz

3) Időzítő: A készülék működésének alapértelmezett időtartama 15 perc. A Time gomb lenyomásával 5-5 perccel tudja növelni a masszáz idejét, egészen 30 percig. A 30. perc elérése után, ha újra megnyomja a Time gombot, az időzítő 5 percről indul. Ezt meg tudja növelni 10 percre, vagy akár az alapértelmezett 15 percre is.

4) Erősség: Nyomja meg az Intensity gombot a masszáz erősségének szabályozásához. Ekkor fel fog villanni a jobb oldali lámpa. Ha növelni akarja a masszáz erősségét, nyomja meg még egyszer az Intensity gombot. Ha mind a bal, mind a jobb lámpa ég, akkor a masszáz erőssége alacsony, gyengéd.

5) Fűtés: A készülék bekapcsolásakor a talp fűtési funkciója automatikusan bekapcsol. Nyomja meg a Heat gombot a fűtési funkció kikapcsolásához. A kijelző fénye elsötétül.

6) Lábtakaró: Miután elindította a készüléket helyezze be lábait a kialakított részre. Ha megnyomja a gombot, a motor leáll. A légszákok megemelkednek és elindul a fűtési funkció, a készülék elindítja a lábmelegítést.

PARAMÉTEREK

Tápellátás: 110V

Áramfelvétel: 48W

Működtetési idő: 15 perc

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen problémát észlel a készülék használatával kapcsolatban, kérjük nézze át az alábbi lehetséges megoldásokat.

Rendellenesség	Lehetséges okok	Megoldási lehetőségek
Nem működik.	1. Próbálja bekapcsolni. 2. Próbálja újraindítani.	1. Ellenőrizze a tápegységet. 2. Kapcsolja be a készüléket, ha a tápegység nem hibásodott meg.
Hirtelen leállás.	1. Áramkimaradás. 2. Túllépte az időkorlátot. 3. Egymás után többször használta a készüléket, ami túlhevüléshez vezetett. 4. Túl nagy nyomásnak van kitéve a készülék, ezért a masszázsgolyók eltömődtek.	1. Ellenőrizze a tápegységhez való kapcsolódást. 2. Kapcsolja be újra a készüléket. 3. Várja meg míg lehűl, csak azután kapcsolja be a készüléket. 4. Indítsa újra a készüléket.

KARBANTARTÁS

- 1) Ha nem használja a készüléket, kérjük helyezze dobozba és biztonságos, száraz helyen tárolja.
- 2) Szellős és hűvös helyen tárolja.
- 3) Ne csavargassa a gombokat és a kábelt.
- 4) Óvja a készülék felületét a karcolásoktól.
- 5) Ne tegye ki közvetlen hőnek és napsütésnek a készüléket.

TISZTÍTÁS

- 1) Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- 2) Kizárólag száraz ruhával törölje át a készülék felületét.
- 3) Ne használjon benzolt, hígítót vagy más maró hatású oldószert a tisztításához.

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS, GARANCIA

1. ELÁLLÁS

A vásárlást követő 14 napon belül Ön indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

Figyelem!

Az elállás kizárólag olyan termékre vonatkozhat, amelyeket legfeljebb egyszer kipróbáltak. Amennyiben a termék folyamatos használat alatt állt a 14 napos időtartam alatt, a termék átvételét és a vételár visszatérítését megtagadjuk.

Az indoklás nélküli elállás során csak hibátlan, sérülésmentes, az eredeti csomagolásba (az eladáskori állapottal megegyezően) visszahelyezett terméket veszünk vissza. Ezért kérjük, hogy a termék csomagolását szíveskedjék 14 napig megőrizni.

2. GARANCIA

A garancia időtartama a vásárlástól (számla kiállításától) számított 12 hónap.

Figyelem!

Használatból eredő minőségi romlásra, sérülésre, hibára a garancia nem terjed ki.

Nem rendeltetésszerű használatból eredő hibára, károsodásra, valamint a nem az előírtak szerinti kezelés, tárolás miatt bekövetkezett sérülésekre a garancia nem terjed ki.



BP World Zrt.

Ügyfélszolgálat: +36 70 394 2297

E-mail: info@bipi.hu

Web: www.bipi.hu